



airScan pro

Wodoodporny | Lekki | z Dopplerem



Dramiński airScan pro

Bądź o krok przed innymi

Lekki, wytrzymały i bezprzewodowy ultrasonograf przeznaczony dla lekarzy weterynarii zajmujących się bydłem oraz końmi.

Zamknięta w **wodoodpornej, aluminiowej obudowie** najnowocześniejsza technologia oferuje **doskonałą jakość obrazu** i czuły **tryb Dopplera**.

Możliwość połączenia z bezprzewodowymi **goglami iLens** zapewnia ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Wymienne akumulatory gwarantują wystarczającą ilość energii na cały dzień skanowania.

Dane techniczne

- Głowice:
Rektalna liniowa 4,2-12,5 MHz, zakres do 19 cm
Rektalna convex 3-7 MHz, zakres do 30 cm
- Czas pracy akumulatora: do 2 godz.
- Czas ładowania akumulatora: do 2 godz. (5V 3A QC, PD)
- Masa: ok. 600 g wraz z głowicą i akumulatorem
- Wodoodporność ze stopniem ochrony IP65
- Kompatybilność z systemem Android/iOS na telefonie lub tablecie




Krowa - serce płodu



Krowa - płód



Krowa - jajnik

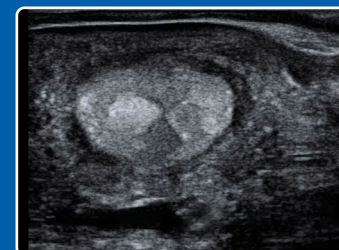

Krowa - macica



Koń - ciąża

airScan
pro

ZDJĘCIA DIAGNOSTYCZNE

Kluczowe cechy

- **Bezprzewodowe połączenie** z urządzeniem mobilnym lub **goglami iLens**
- Ta sama aplikacja dla naszych bezprzewodowych głowic abdominalnych
- **Tryby Dopplera** umożliwiają rozpoznanie krów niebędących w ciąży w 18-stym dniu po sztucznej inseminacji, poprzez ocenę przepływu krwi w ciałku żółtym
- Bezpieczne zamocowanie na pasie biodrowym
- **Wymienne akumulatory**
- Ładowanie za pomocą standardowego kabla **USB-C** w domu lub w samochodzie
- **Ergonomiczny panel sterowania** ze wskaźnikiem naładowania akumulatora
- Szybkie i łatwe czyszczenie oraz dezynfekcja

Zastosowanie

	airScan pro rektalny LINIOWY	airScan pro rektalny CONVEX
Rozród bydła	+	+
Rozród koni	+	+
Rozród małych przeżuwaczy		+
Określanie płci płodu	+	+
Przepływ krwi w ciałku żółtym	+	+
Płuca	+	+
Ocena kondycji ciała zwierzęcia	+	+
Wymię i strzyk	+	
Wątroba		+
Przewód pokarmowy	+	+
Ścięgna	+	

Pomiary

- Siatka
- Odległość
- Wiek płodu



Aplikacja Dramiński airScan

Połącz ultrasonograf airScan pro z Twoim urządzeniem.



Zestaw zawiera

- **airScan pro** z wbudowaną głowicą rektalną liniową lub głowicą rektalną convex
- Pas biodrowy z systemem szybkiego montażu
- 2 zewnętrzne akumulatory
- Ładowarkę
- Walizkę transportową
- Instrukcję obsługi (pamięć flash USB)



Krowa - aktywne ciałko żółte



ZOBACZ WIĘCEJ

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk



693 393 113



usgv@draminski.com

Obserwuj nas:



www.draminski.pl